



DIABASS[®]
SecureSend

Příjem dat z měřicích přístrojů a aplikací pro diabetes



- ✓ kompatibilní více než s 200 měřicími přístroji
- ✓ kompatibilní s řadou aplikací pro diabetes
- ✓ bez nevýhod cloudových řešení

Cloudová řešení při managementu diabetu: Znáte rizika a doprovodné náklady?

Cloudová řešení digitálního managementu diabetu přináší lékařům/klinikám **značné povinnosti a rizika:**

- ⚠️ nutnost **posouzení vlivu na ochranu osobních údajů** podle čl. 35 GDPR, resp. DIN ISO 29134
- ⚠️ **konzultace s úřady** jsou v mnoha otázkách nevyhnutelné (čl. 36 GDPR)
- ⚠️ lékař/klinika musí většinou souhlasit s **komerčním využitím** osobních údajů pacientů
- ⚠️ **vysoké riziko pokut:** lékař/klinika nesou spoluodpovědnost za porušení ochrany osobních údajů poskytovatele
- ⚠️ lékař/klinika musí získat **účinný souhlas** pacientů

§ Jiná možnost: *DIABASS*[®] SecureSend

Ušetřete si rizika a nevýhody spojené s použitím cloudu: Přesto si však můžete nechat zasílat údaje pacientů z měřicích přístrojů a aplikací pro diabetes.

DIABASS[®] SecureSend Vám přináší **právně bezpečné a komfortní řešení:** Osobní údaje se na počítači resp. smartphonu pacienta kódují podle nejvyššího standardu (AES-256) a následně zasílají přes e-mail. Díky kódování „end-to-end“ je zajištěno, že k osobním údajům nebude mít přístup žádná třetí osoba.

👍 Je to tak jednoduché

- 1 Vytiskněte pacientovi informační leták s přístupovými údaji a návodem.
- 2 Pacient si doma odečte údaje z měřicích přístrojů, resp. pošle údaje ze své aplikace používané pro diabetes
- 3 Vy obdržíte e-mail se zakódovanou přílohou.
- 4 E-mail se automaticky vyvolá, dekóduje a převezme do systému *DIABASS*[®]




Uchovávání dat z aplikací pro diabetes je jednoduché

Příklad: Aplikace Contour Diabetes

Krok 1

Přejděte v aplikaci Contour Diabetes do nabídky **MŮJ PROFIL**, a zde do složky **ZPRÁVY**. Zde pak klikněte na **SOUBOR NEZPRACOVANÝCH ÚDAJŮ (CSV)**.

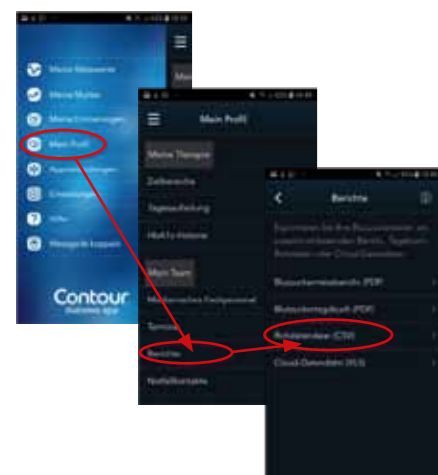

Krok 2

Klikněte na symbol **SDÍLENÍ** na levém spodním okraji monitoru. Na liště, která se objeví, vyberte aplikaci *DIABASS*[®] SecureSend.



Krok 3

Aplikace *DIABASS*[®] SecureSend se automaticky spustí. Při prvním spuštění vyberte „**JINÝ PŘÍJEMCE**“ a naskenujte čárový kód, který jste obdrželi od lékaře.



Krok 4

Klikněte na **DÁLE**. Nyní se zobrazí údaje o odeslání načtené z čárového kódu. Pokud jsou údaje správné, klikněte na **DÁLE**.




Krok 5

Zde můžete zadat (volitelnou) zprávu pro příjemce. Pak klikněte na **DÁLE**.



Krok 6

Data jsou nyní zakódovaná s vysokým stupněm zabezpečení (AES-256) a připravena k odeslání. Nyní zvolte způsob odeslání a potvrďte pomocí **DÁLE**.

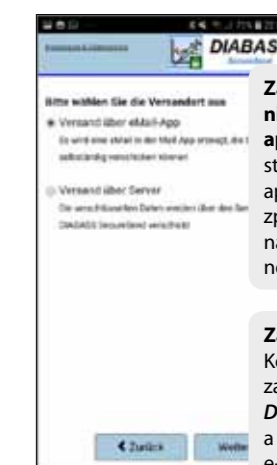

Zaslání prostřednictvím e-mailové aplikace: Ve Vaší standardní e-mailové aplikaci se vygeneruje zpráva, kterou musíte následně ještě manuálně odeslat.

Zaslání přes server: Kódované údaje jsou zaslány na server *DIABASS*[®] SecureSend a odsud dále zaslány e-mailem s neutrálním odesílatelem příjemci.



Výhody softwaru **DIABASS® SecureSend**

- ✓ Příjem dat z **více než 200 měřicích přístrojů** (BGM, CGM, inzulinové pumpy, krevní tlak)
- ✓ **Kompatibilita s mnoha deníkovými aplikacemi** pro diabetes a krevní tlak (např. mySugr, Contour Diabetes-App, OMRON, ...)
- ✓ Bez předávání **údajů o pacientech** třetím osobám
- ✓ Vysoce bezpečné **kódování** end-to-end (AES-256)
- ✓ Naprosto **snadné** ovládání
- ✓ Údaje jsou **automaticky** přebírány vyhodnocovacím softwarem **DIABASS®**
- ✓ **Bez závislosti** na fungování cloudových služeb
- ✓ **Bezplatný software / bezplatná aplikace** pro pacienty
- ✓ **Otevřený pro všechny** výrobce a systémy
- ✓ Příjem dat lze **pozastavit**
- ✓ Zobrazení **loga ordinace a každodenních informací** (např. dovolená) v aplikaci



Otevřený pro všechny měřicí systémy a aplikace

Pomocí bezplatného softwaru pro nahrávání si může pacient načítat údaje ze všech běžných glukometrů, z FGM/CGM i inzulinových pump, z tonometrů a jiných zařízení (např. krokoměřů) a tyto údaje odesílat. Bezplatná aplikace pro iOS/Android umožňuje odesílání dat z mnoha deníkových aplikací pro diabetes a krevní tlak. Seznam kompatibilních přístrojů/aplikací se průběžně rozšiřuje.



Doplňkové využití: Logo Vaší ordinace v aplikaci

Na přání můžete uložit logo ordinace, které se pak zobrazí v pacientově aplikaci. Získáte tak v podstatě vlastní aplikaci pro diabetiky pro svou ordinaci.

Rovněž je možné zde ukládat aktuální informace, jako je dovolená ordinace nebo zastupování, a **zobrazovat je v aplikaci.**

Produkt společnosti mediaspects GmbH,
P.O.Box 10 07 31, D-72307 Balingen

mediaspects

